

Fiche Produit



Prothèse de hanche

L'esprit de synthèse

FIRST

Cotyle


FIRST Cotyle

La cupule en titane d'épaisseur réduite 3 mm, est impactée en press-fit de 2 mm dans la grande majorité des cas.

En fonction de la stabilité acquise, 5 trous placés dans le toit cotyloïdien offrent la possibilité d'un complément de fixation par vis de diamètre 5 ou 6 mm.

Le double revêtement de titane pur, (épaisseur 250 µm) et d'hydroxyapatite (épaisseur 125 µm), active et canalise l'ostéogénèse.

- Cotyle métal back hémisphérique.
- Fixation complémentaire par vis.
- Insert en polyéthylène pour tête de 28 mm à bord plat ou à débord anti-luxation.

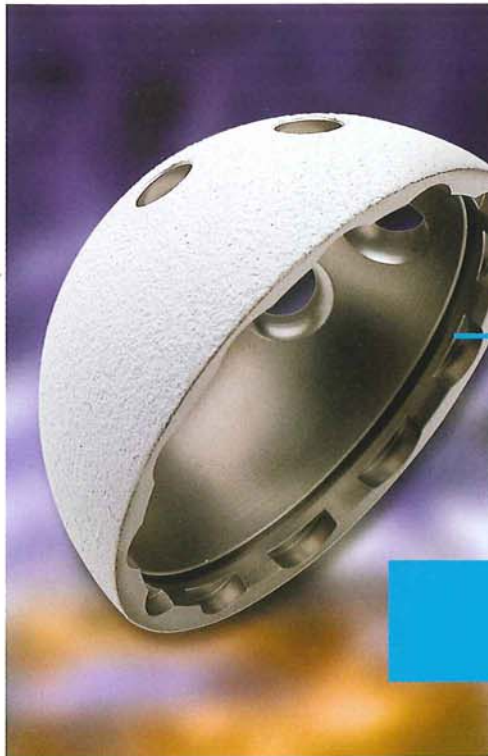

L'insert en polyéthylène GUR 412 (d'épaisseur minimum 6 mm) est fixé à la cupule par une lèvre de clippage.

Des crénelages périphériques tous les 30° le stabilise en rotation et permettent le réglage en position de l'insert à débord 10°.

Il a une surface de contact maximale avec la concavité lisse de la cupule pour limiter le fluage et l'usure.

Confort et stabilité

Cupules	ø ext.46 mm	ø ext.48 mm	ø ext.50 mm	ø ext.52 mm	ø ext.54 mm
Cupule	19460980	19480980	19500980	19520980	19540980
	ø ext.56 mm	ø ext.58 mm	ø ext.60 mm	ø ext.62 mm	ø ext.64 mm
	19560980	19580980	19600980	19620980	19640980

Inserts	ø ext.46 mm	ø ext.48 mm	ø ext.50 mm	ø ext.52 mm	ø ext.54 mm
Bord plat	19462850	19482850	19502850	19522850	19542850
	ø ext.56 mm	ø ext.58 mm	ø ext.60 mm	ø ext.62 mm	ø ext.64 mm
	19562850	19582850	19602850	19622850	19642850
Débord 10°	ø ext.46 mm	ø ext.48 mm	ø ext.50 mm	ø ext.52 mm	ø ext.54 mm
	19462860	19482860	19502860	19522860	19542860
	ø ext.56 mm	ø ext.58 mm	ø ext.60 mm	ø ext.62 mm	ø ext.64 mm
	19562860	19582860	19602860	19622860	19642860

Inserts plats cylindro-sphériques pour tête 22,2 mm prochainement disponibles.

Vis	L.15 mm	L.20 mm	L.25 mm	L.30 mm	L.35 mm	L.40 mm	L.45 mm	L.50 mm
Vis ø 5 mm	84501580	84502080	84502580	84503080	84503580	84504080	84504580	84505080
Vis ø 6 mm	84601580	84602080	84602580	84603080	84603580	84604080	84604580	84605080

Référence Ancillaire : A34512

FIRST

Fabricant : SGM - Z.I. Montreynaud - 19, rue Victor Grignard 42026 Saint Etienne Cedex 1 - France